

JIVE

Cadeiras electrónicas
gama alta



A gama **JIVE** de cadeiras electrónicas



JIVE M
Tração central



JIVE R²
Tração traseira



JIVE F
Tração dianteira



Tecnologia modular

A tecnologia modular permite seleccionar de forma independente a base de tração, o sistema de assento e as opções eléctricas. Este conceito avançado maximiza as possibilidades da cadeira com uma única plataforma. Desta forma é possível alterar a configuração da cadeira, assim como adicionar ou remover opções e acessórios, em qualquer momento para adaptá-la às necessidades do usuário.

Sistema de assento

JAY Comfort



JAY clínico



Recaro e outros tipos de assento



Módulos intermédios

Elevação e basculação



Basculação de 30° ou de 50°



Bases de tração



Tração traseira



Tração central



Tração dianteira



Inovador sistema de assento

O desenho inovador da estrutura do assento e encosto combina simplicidade com uma grande versatilidade, permitindo adaptação de todo o tipo de opções e acessórios de uma forma muito simples e segura.


- Quickie Jive adapta-se perfeitamente às dimensões do usuário graças ao seu ajuste infinitesimal em largura e profundidade.
- O assento é ajustável em largura entre 40 e 56 mediante os apoios de braços. As almofadas estão disponíveis em cinco tamanhos diferentes (40, 44, 48, 52 e 56 cm), mas também se podem pedir outras medidas através do serviço de cadeiras personalizadas Built-4-Me.
- A profundidade da estrutura do assento é ajustável entre 41 e 55 cm, movendo o encosto.
- Dois tipos de apoios de braços disponíveis: o standard ajustável em largura e altura, e o reclinável abatível.



Sistema de assento ajustável em largura e profundidade através dos apoios de braços e dos apoios de pés

Adaptação de acessórios muito simples e segura

O perfil oval da estrutura incorpora umas guias nas quais se adaptam uns **encaixes especiais**. Estes encaixes adaptam-se a qualquer acessório (como comandos especiais, comunicadores, respiradores, etc), que ficam fixos na estrutura de uma forma simples e segura.

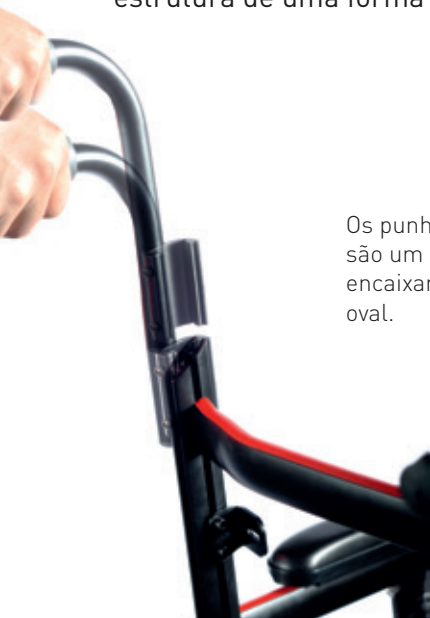

Os punhos ajustáveis em altura são um dos acessórios que se encaixam facilmente à estrutura oval.



Estrutura do Perfil Oval com guias.



Assentos Jay Comfort

O sistema de assento standard é o JAY Comfort, uma gama de almofadas e encostos anatómicos que oferecem ao usuário grande conforto.

Assentos e encostos JAY clinical, opcionais.

O desenho da estrutura de JIVE permite incorporar facilmente uma gama completa de almofadas e encostos Jay, para aqueles usuários que necessitam maior posicionamento ou protecção antiescaras.



Os Encostos JAY 3 fixam na cadeira mantendo o seu próprio encaixe para permitir uma desmontagem rápida.

Diferentes tipos de assentos facilmente adaptáveis.

A estrutura tem vários pontos de encaixes nos quais se podem fixar outros tipos de assento como assentos moldados personalizados.



Pontos de encaixe do encosto, para fixar com facilidade outros tipos de assentos.

Assentos Recaro

Os assentos Recaro estão também disponíveis com qualquer uma das bases de tração.



JIVE® M

Condução suave e
incrivelmente
confortável



JIVE M é a versão da Tração Central - As suas prestações ao mais alto nível como a inovadora suspensão "SpiderTrac™" ou os comandos P&G oferecem a condução mais cómoda, segura e estável em qualquer terreno.




Suspensão SpiderTrac™: A condução mais segura e confortável em qualquer terreno.

O inovador mecanismo de suspensão SpiderTrac oferece múltiplos benefícios:

Evita que o usuário balance ao descer passeios

- Quando as rodas dianteiras descem um passeio, as traseiras giram até baixo para manter o contacto com o solo. Isto activa o gás no cilindro de suspensão, amortecendo o impacto e evitando que o usuário balance para a frente.

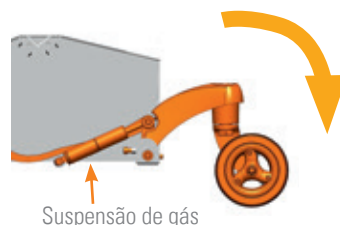

Amortecer os impactos para uma condução suave e muito confortável



- A suspensão de gás amortece o impacto dos movimentos produzidos ao conduzir a cadeira em terrenos irregulares, de forma que esses impactos não são sentidos pelo usuário.

Ajuda a manter a posição horizontal do usuário

- O desenho permite mais de 10 cm de movimento nas rodas traseiras e dianteiras. Assim a base adapta-se às alterações do terreno e apenas se altera a posição do assento.
- Desta forma o usuário mantém a posição horizontal ao solo mesmo subindo ou descendo passeios. Reduz-se o balanço e melhora a segurança da condução.

Máxima tração em qualquer situação.

- A conexão entre as rodas traseiras e dianteiras provoca um movimento descendente da roda central.
- Assim evita-se que a roda de tração chegue a perder o contacto com o solo ao mudar de declive (por exemplo ao subir ou descer rampas desde o automóvel).
- Desta forma é garantida a máxima tração da cadeira.

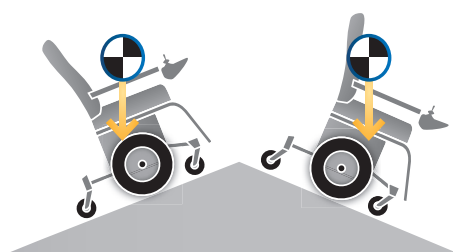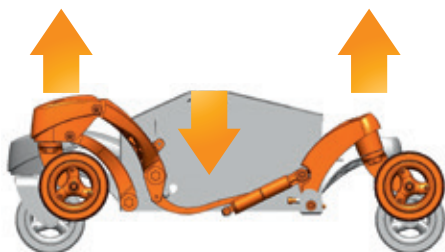


Excelente manobrabilidade em interiores

- Graças à sua tecnologia de tração central, a cadeira gira sobre o seu próprio eixo, num raio muito reduzido. Desta forma consegue-se uma **excelente manobrabilidade em espaços interiores** e entre os móveis.
- As **dimensões compactas** da base permitem fácil acesso aos elevadores, através de portas, passeios, etc...
- **Bom posicionamento das pernas.** O desenho da cadeira permite que o usuário possa manter um ângulo de 90° nos seus quadris e joelhos, assegurando um correcto posicionamento.
- **Grande acessibilidade.** Devido aos seus 42 cms de altura ao solo, o acesso a mesas é muito fácil, mesmo com os módulos de basculação incluídos.

Condução muito simples e intuitiva

Ao ter a tração na roda central, o eixo de giro da cadeira coincide com o do próprio usuário. Desta forma os movimentos da cadeira são muito fáceis de calcular para o usuário.

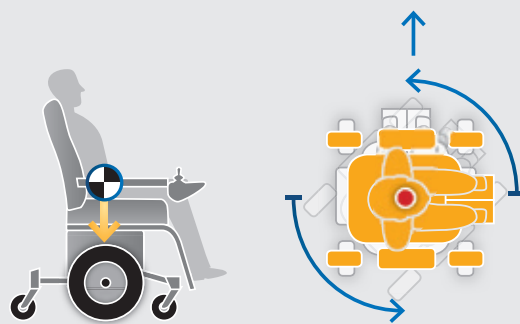

Opções Eléctricas:

- Basculação de 0° a 30° ou de -5° a 25°
- Basculação de 0° a 50° para o máximo alívio da pressão
- Elevação do assento de 30cm
- Módulo combinado de elevação (30 cm) e basculação 30°
- Reclinação eléctrica do encosto entre -10° e 40°
- Apoios de pés eleváveis e articulados eléctricos.
- Apoios de pés centrais eléctricos.



Grandes prestações para exteriores

- Condução muito suave e confortável em qualquer terreno
- Excelente estabilidade e segurança
- Máxima tração em todas as superfícies
- Capacidade para ultrapassar obstáculos até 10 cm
- Estabilidade dinâmica de 10°
- Baterias de 70 Amph



- Imagem Moderna
- Caixa de controlo e módulos de controlo opcionais (como Bluetooth) montados na base
- Amplo espaço para os pés entre as rodas dianteiras
- Centro de gravidade ajustável (em todas as bases de tração).
- Suspensão ajustável na roda de tração
- Disponível com velocidades de 10Km/h (opcionais 13Km/h e 6 Km/h)

Fácil Manutenção

- Sistema de bloqueio automático do assento para aceder comodamente à base.
- Fácil acesso às baterias.



JIVE R² e JIVE F:
Gama alta de
cadeiras exterior



Desenho Moderno e Atractivo

O moderno desenho da carcaça combinado com as jantes de 3 raios, os detalhes de cor na estrutura do encosto e nos apoios de braços fazem da Jive uma cadeira com uma imagem muito atractiva e actual. Carcaças disponíveis nas cores vermelho, azul e branco.

JIVE R²: base de tração traseira

JIVE F: base de tração dianteira



Disponível tanto na tração traseira como na dianteira. Duas grandes opções, para adaptar-se às necessidades do ambiente e às preferências do usuário.

Forte e Robusta, para um óptimo rendimento em exteriores:

- Altura do assento ao solo desde 43 cm (com módulos eléctricos).
- Baterias de 70 Amph.
- Velocidade de 10 Km/h como standard (opcional 13Km/h e 6 Km/h)
- Caixa de controlo R-Net de 90A e opcional de 120A
- Largura total desde 63cm na Jive com tração traseira e desde 64cm na Jive com tração dianteira

Desenho simples e de fácil acesso

- Desenho da carcaça limpo, disponível em 3 cores: vermelho, branco e azul
- As caixas de controlo e os módulos adicionais R-Net ficam escondidas dentro da carcaça.
- A Jive R² com tração traseira oferece um cómodo acesso às baterias e à caixa de controlo desde a parte traseira da carcaça e com a pessoa sentada na cadeira
- No caso da Jive F com tração dianteira do assento conta com um sistema de bloqueio automático para facilitar o serviço técnico

Opções Eléctricas:

- Basculação de 0° a 30° ou de -5° a 25°
- Elevação do assento de 30 cm
- Módulo combinado de elevação (30cm) e basculação 30°
- Reclinação eléctrica do encosto entre -10° e 40°
- Apoios de pés eleváveis e articulados eléctricos
- Apoios de pés centrais eléctricos



Acesso às baterias
(Jive F tração dianteira)



Fácil acesso às baterias desde a parte traseira da carcaça
(Jive R² tração traseira)

Sistemas de controlo de altas prestações

A cadeira JIVE dispõe de uma grande variedade de sistemas de controlo, para encontrar o mais adequado às necessidades do usuário. Desde o completo comando standard R-NET com monitor LCD a cores até uma ampla gama de comandos especiais.

Comandos R-Net

Com a caixa de control de 90Amph (120 Amph opcional) os comandos R-NET são o sistema de controlo mais adequados para oferecer maiores prestações e/ou mais potência.



Comando Standard com Monitor LCD a cores



Módulo de control OMNI+ com monitor a cores



Comando do usuário e do acompanhante

- O Sistema R-NET oferece simples opções de programação, resultados de condução excelentes e uma grande fiabilidade.
- Permite até 6 actuadores controlados por joystick ou por botões externos programáveis.
- Permite a programação de perfis de condução para que o usuário possa alterar de perfil em função do ambiente em que se está movendo.
- Controlo de rato para Windows PC por Bluetooth. Também válido para Tablets Android / Windows e Smartphones via Software adicional.
- Botões destacáveis, personalizáveis para ser mais simples o acesso às funções mais comuns do usuário.



Configurador on-line WebIQ

Através da ferramenta de configuração on-line (webIQ) se pode programar a cadeira, alterar os seus parâmetros por defeito ou alterar o idioma do comando. Também permite guardar configurações de programação personalizadas atribuídas a um número de série da cadeira. Tudo isto facilita a adaptação da cadeira às necessidades do usuário ao longo do tempo.



Controlos especiais

Quando o usuário tem uma capacidade limitada de movimento das suas mãos, estão disponíveis diferentes opções de comandos e pulsadores para controlar o movimento da cadeira com a cabeça. Além da oferta de controlos especiais incluídos na folha de pedido da JIVE, também está disponível o serviço de personalização Built-4-Me para adaptar o comando às necessidades individuais de cada usuário.



Comando de cabeça



Comando mediante pulsadores colocados na bandeja



Mini- Joystick pulsador por pressão usado como mentoniano



Joystick compacto usado como mentoniano

Mini-Joystick pulsador por pressão

Requer pouca força para mover e controlar a cadeira. com praticamente nenhum desvio próprios de outro tipo de comandos.



Aprovada para o transporte em veículos

As cadeiras electrónicas JIVE passaram com êxito os testes de homologação para o transporte em veículos, conforme exigido na Norma ISO 7176 - 19.

Segurança no Transporte

Em virtude das provas realizadas e dos resultados obtidos, as cadeiras JIVE suportam adequadamente a força do impacto em caso de choque do veículo (segundo o requerido na ISO 7176-19). Portanto, está permitido para que o usuário seja transportado num veículo, sentado na sua cadeira JIVE.

Personalização

Além das opções e acessórios disponíveis na Folha de Pedido, a cadeira Jive pode ser personalizada através do Built-4-Me. Tanto para alterações estéticas ou de adaptações por necessidades clínicas do usuário, tudo isto se pode gestionar através do serviço de personalização Built-4-ME.

Como funciona? Ouvimos as suas necessidades de personalização, analisamos e projectamos a melhor proposta que responda a essas necessidades, juntamente com a avaliação económica da adaptação, após aceitação do orçamento, procedemos à sua fabricação e envio.

Exemplos de fabricação

Estes são alguns exemplos de possíveis personalizações na cadeira JIVE, como referência.



Além das cores standard disponíveis na folha de pedido (vermelho, azul e branco) pode ser pedido (mediante orçamento), outras cores tanto na base de tração central como nas de tração dianteira e traseira.

Para mais informação sobre o serviço de personalização Built-4-Me, visite a nossa página web


www.SunriseMedical.es

Adaptações de comandos de controlo

Estes são apenas alguns exemplos de possíveis personalizações de comandos de controlo, como referência.



Comando Mentoniano com suporte eléctrico e com pulsadores adicionais

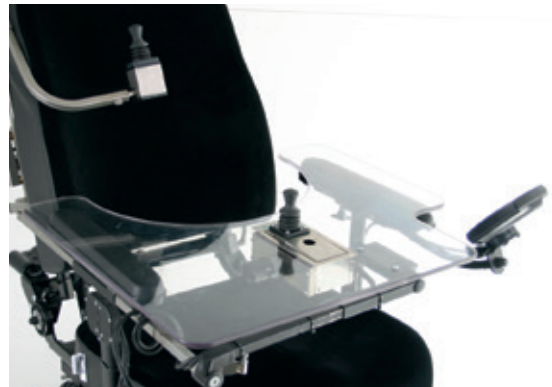

Joystick montado na bandeja (a bandeja pode ser invertida e fica plana).



Joystick montado no centro com caixa de actuadores adicional



Botões pulsadores e joystick montados na bandeja

Adaptações para a prática de desporto como o kit de Hockey

O kit de Hockey inclui:


- Protector traseiro
- Protector dianteiro
- Bloqueio anti-balanço

Além disso o bloqueio anti-balanço e os protectores podem ser retirados com facilidade para converter a JIVE de hockey numa cadeira diária.





Especificações técnicas:

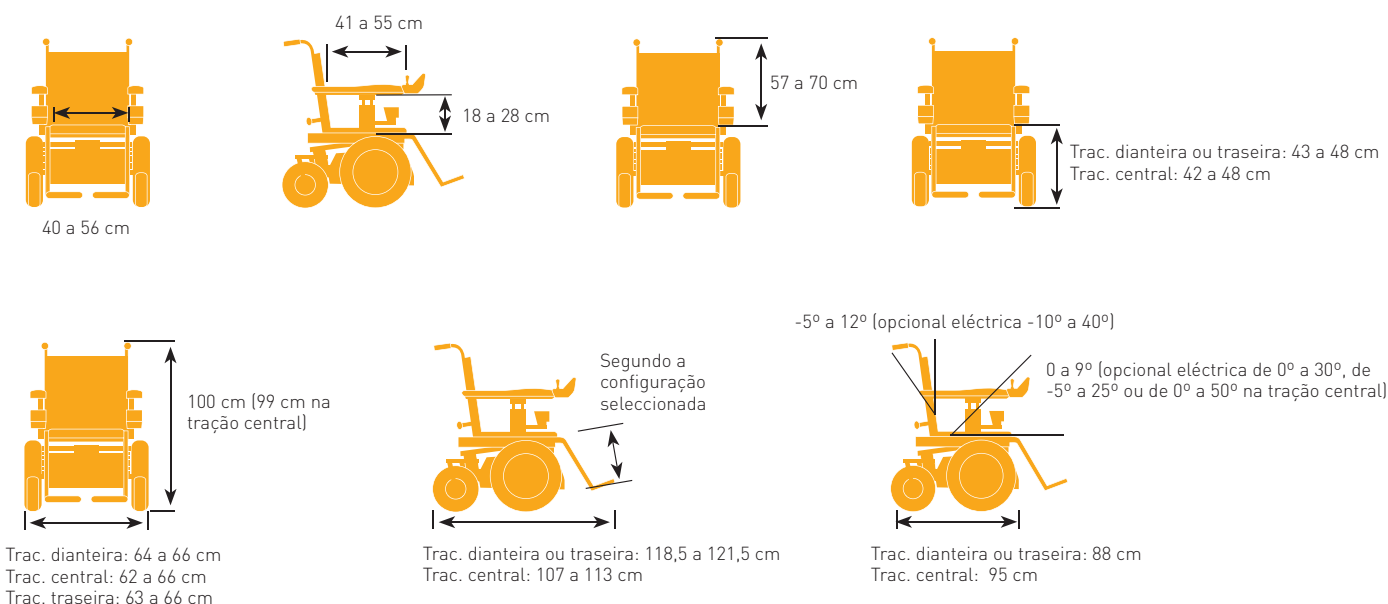

As dimensões podem variar segundo a configuração da cadeira e das opções seleccionadas

Largura do assento:	40 / 44 / 48 / 52 / 56 cm	Reclinação:	-5° a 12° (opcional eléctrica de -10° a 40°)
Profundidade do assento:	41 / 46 / 51 / 55 cm	Raio de giro:	56 cm (central), 100 cm (traseira) 70 cm (dianteira)
Altura do encosto:	57 a 70 cm (57 cm encostos Jay comfort std)	Inclinação máxima:	18% (11% com tração dianteira)
Altura do assento:	43 a 48 cm (42 a 48 cm tração central)	Baterias:	70 Ah
Largura total: desde 62 cm (central) 63 cm (traseira) 64 cm (dianteira)		Velocidade tração traseira e central:	10Km/h (13Km/h, 6Km/h)
Comprimento total:	18,5 a 121,5 cm (107 a 113 cm tração central)	Velocidade tração dianteira:	10 Km/h (6Km/h)
Comprimento total sem apoio de pés:	88 (95 cm tração central)	Altura máxima do passeio:	10 cm
Basculação manual standard:	0 a 9°	Peso máximo do utilizador:	160 Kg
Basculação eléctrica:	0° a 30° (opção de 0° a 50° na tração central)	Peso total com baterias:	115 a 187 kg

Tolerância de Fábrica +/- 1 cm

Para mais informações sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.